
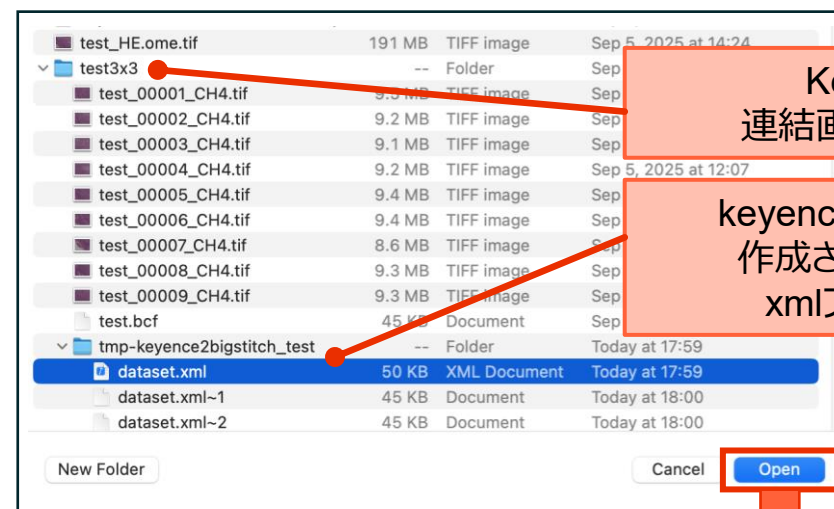


KEYENCE BZ-X700で撮影した
連結画像をkeyence2stitchedOMETIFF_v2.2で
連結したけどちょっとずれているとき。。。

BigStitcherを使って手動で再計算させると
わりと上手になる（ダメなときはさらに再計算すると良い）
再計算で出た座標情報（xmlファイル）をもとに
xml2stitchedOMETIFF_v1.2にて連結画像を作成する



keyence2stitchedOMETIFFで作成した連結画像がちょっとずれているので修正したい。。。。

① BigStitcherを使用する (Plugins > BigStitcher)

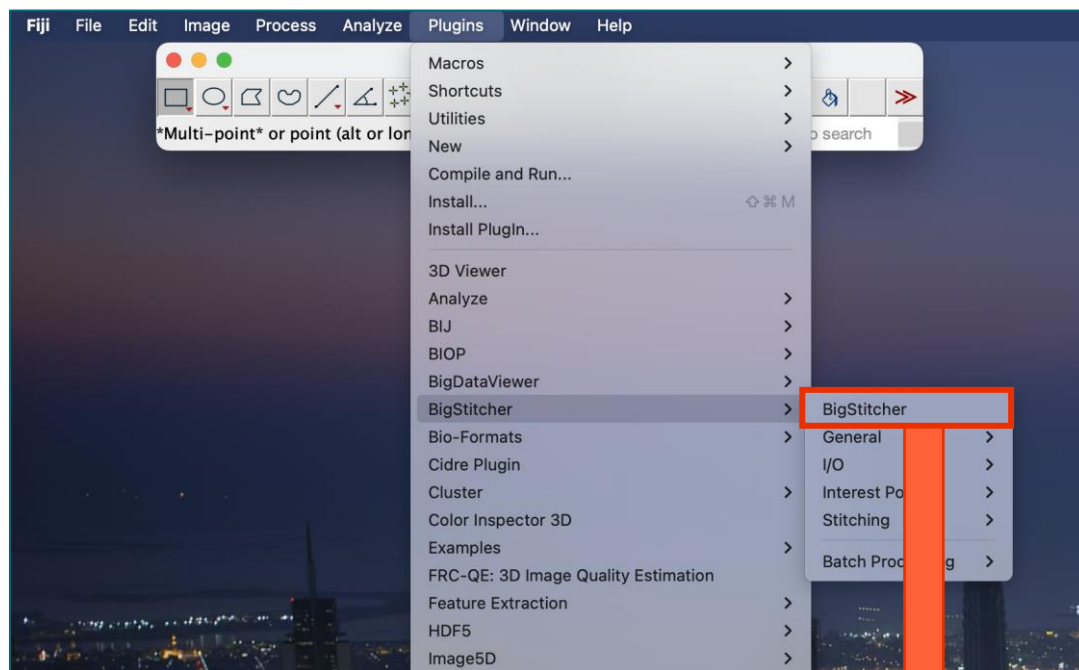


Keyenceで取得した
連結画像が入っているフォルダ

keyence2stitchedOMETIFFで
作成された一時フォルダの中に
xmlファイルがあるので選択

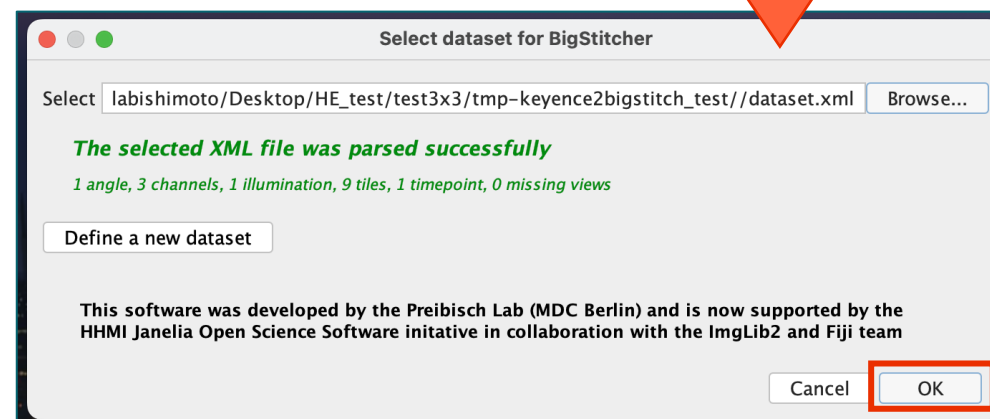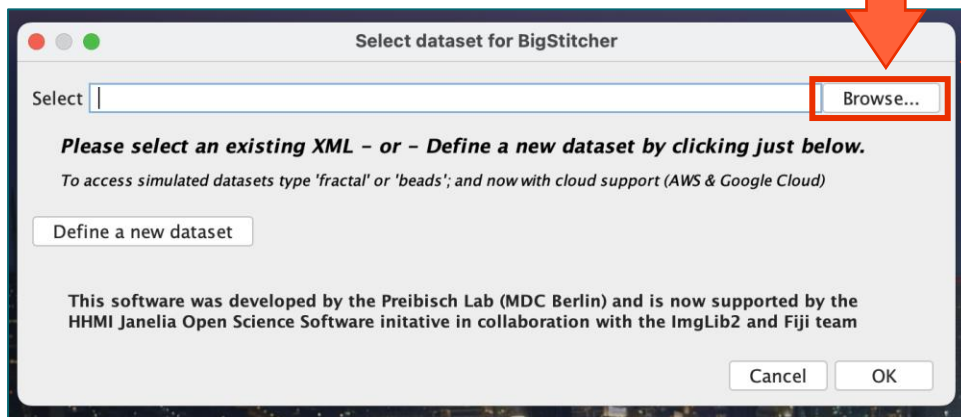





keyence2stitchedOMETIFFで作成した連結画像がちょっとずれているので修正したい。。。
 ② 全選択して右クリック → Calculate Pairwise Shifts > Phase Correlation

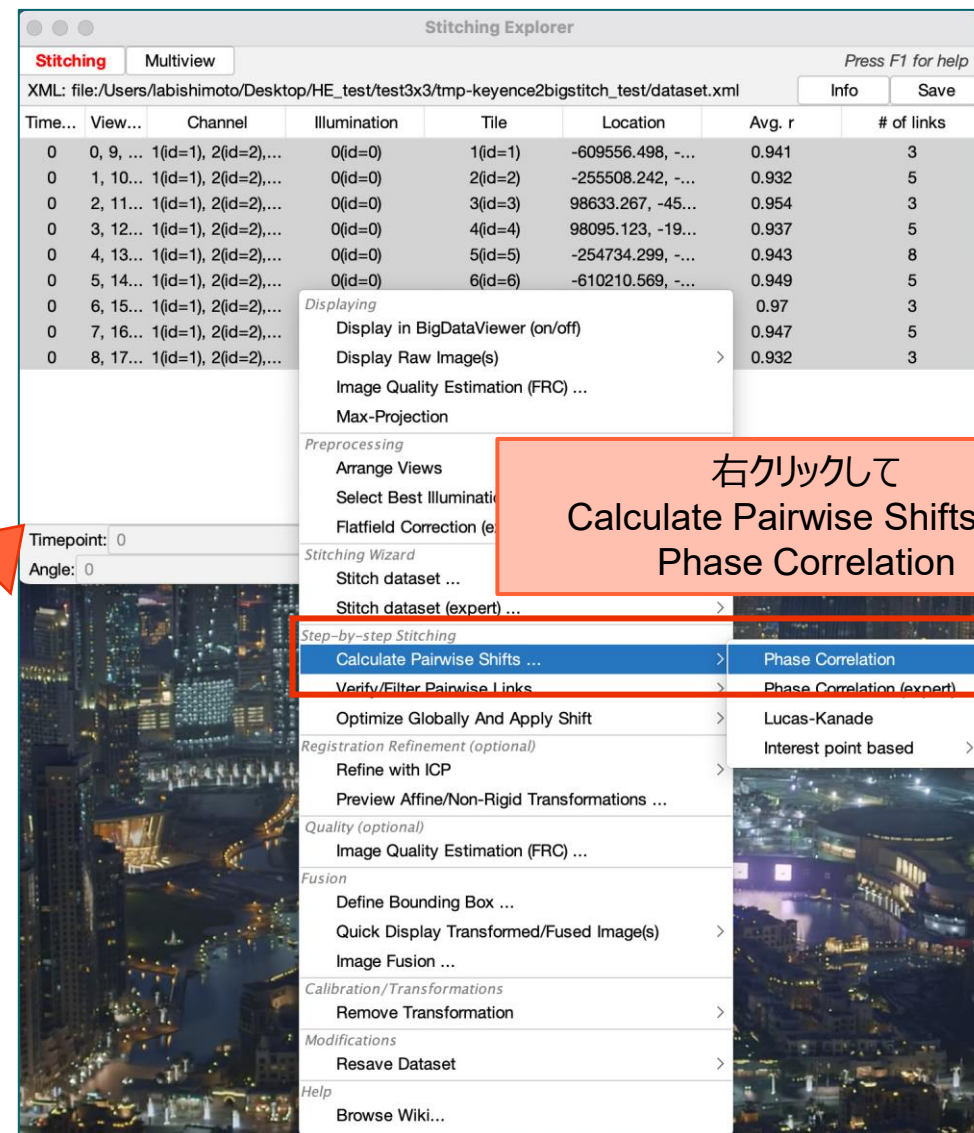

Stitching Explorer上で全選択する
 ※Win: ctrl + A
 ※Mac: command + A

keyence2stitchedOMETIFFで作成した連結画像がちょっとずれているので修正したい。。。。
 ③ Calculate Pairwise Shifts > Phase Correlation の続き

画像がHEのとき → Average Channelsを選択
 画像がIFのとき → DNAのchannelを選択

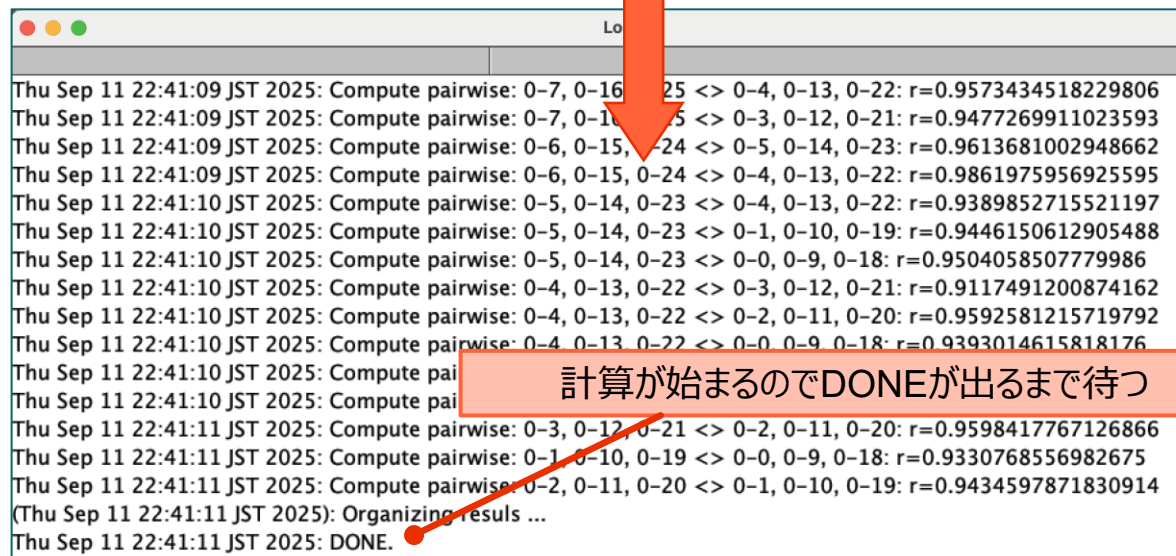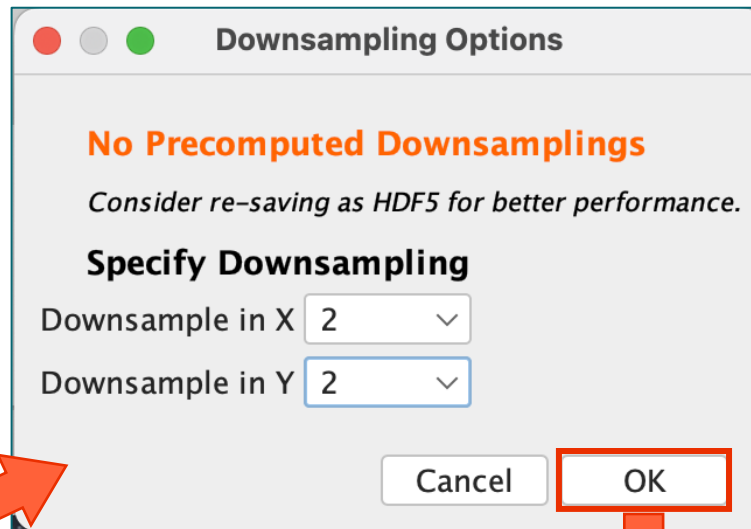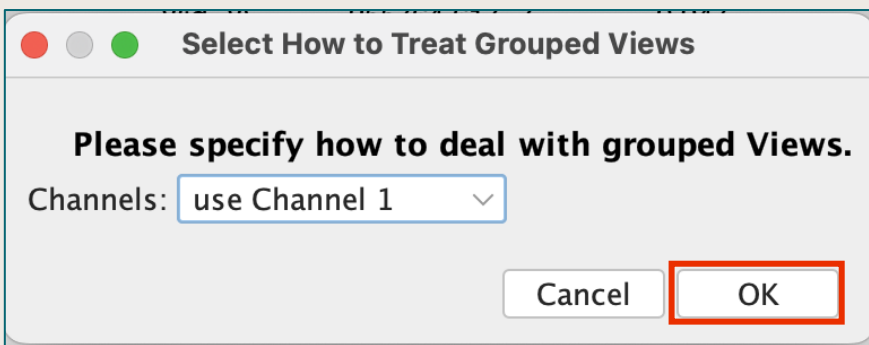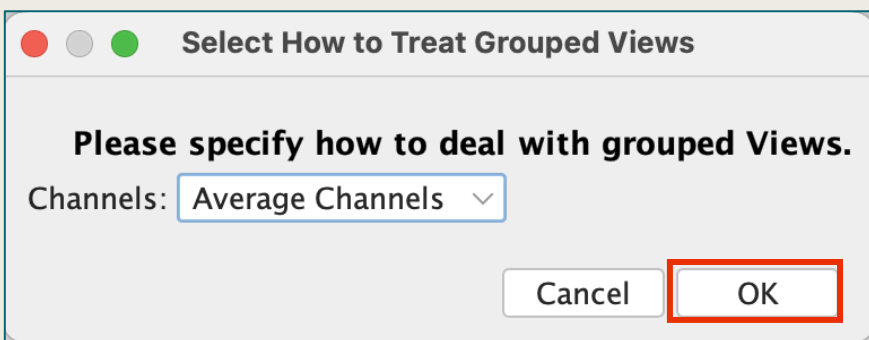


計算が始まるのでDONEが出るまで待つ


keyence2stitchedOMETIFFで作成した連結画像がちょっとずれているので修正したい。。。

④ 右クリック → Verify/Filter Pairwise Links > Interactive Link Explorer...

Stitching Explorer上で右クリックして
Verify/Filter Pairwise Links >
Interactive Link Explorer...

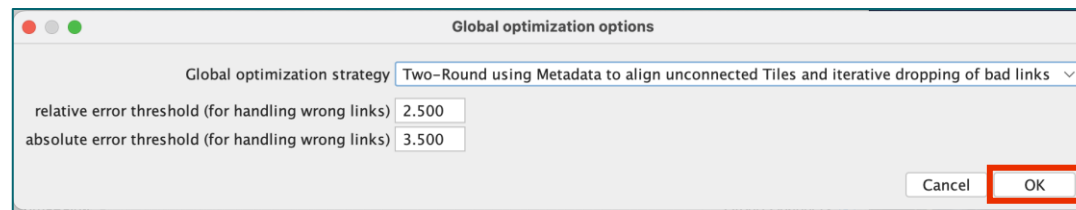



done が出るまで待つ
※データが大きい場合は出ないこともあるので注意！
※よく見るとBigDataViewerの表示が修正されている
(ずれが無くなっている) ので終了していることがわかる

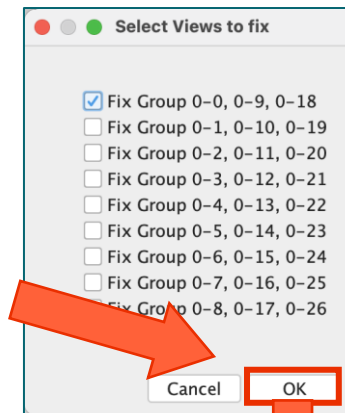




tpid=0 setupId=25: (1, 0, 0, -244.514), (0, 1, 0, -83.6013), (0, 0, 1, 0), Scaling: 1, 1, 1
tpid=0 setupId=26: (1, 0, 0, -0.4387), (0, 1, 0, -548.4942), (0, 0, 1, 0), Scaling: 1, 1, 1
Thu Sep 11 22:43:50 JST 2025: Not more than one group left after first round of global opt (all views are connected), this means we are already done.

Saveする
※Bigstitcherはここで終了

Apply & Global Optimization

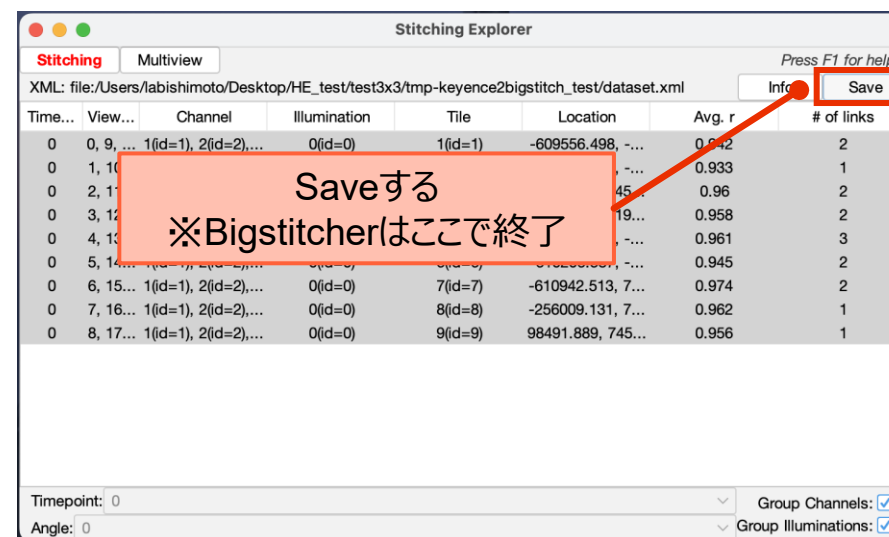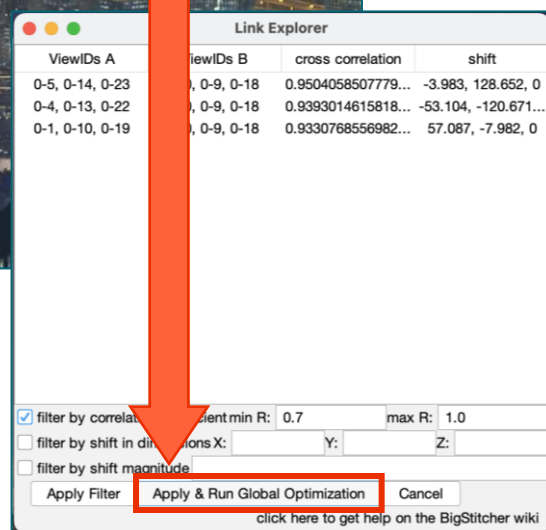


keyence2stitchedOMETIFFで作成した連結画像がちょっとずれているので修正したい。。。。
⑤ プラグインを使用する (Plugins > Macros > xml2stitchedOMETIFF_v1.2)

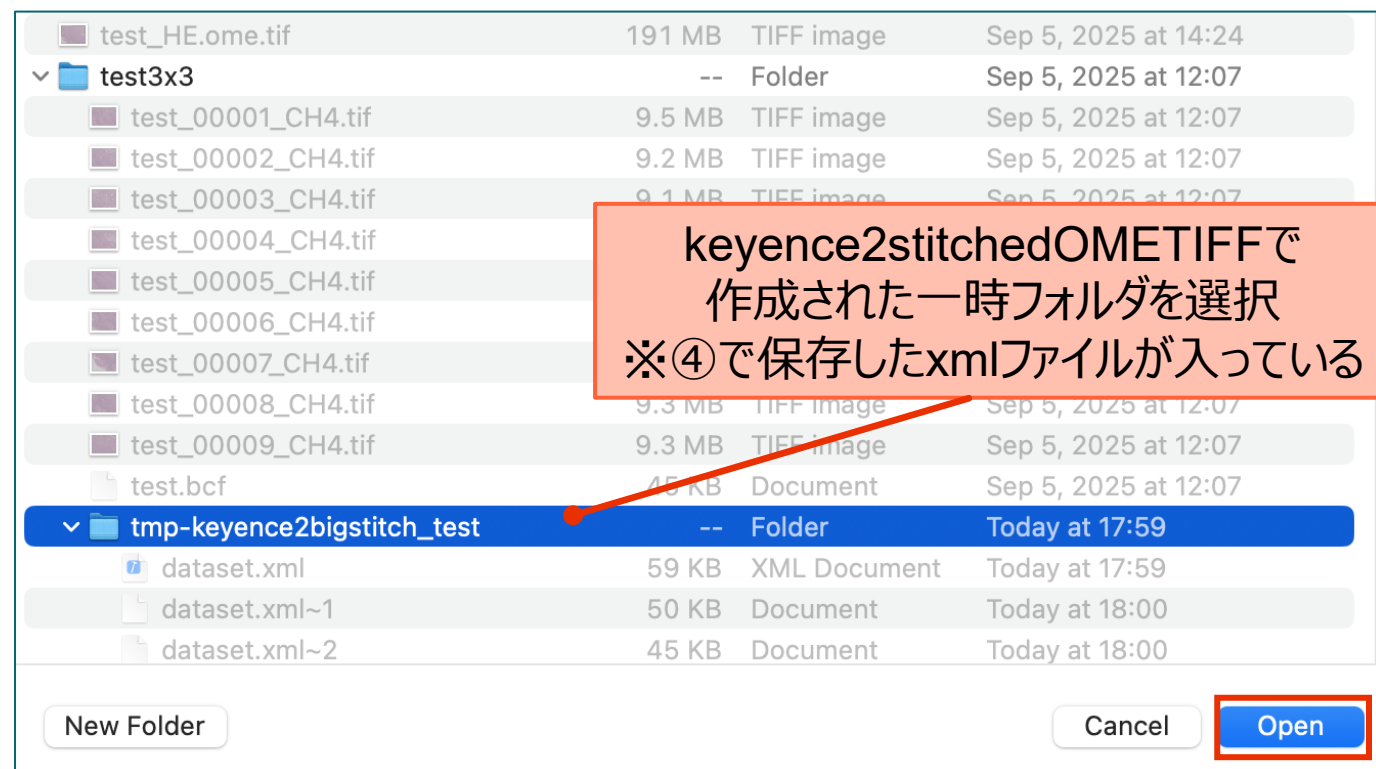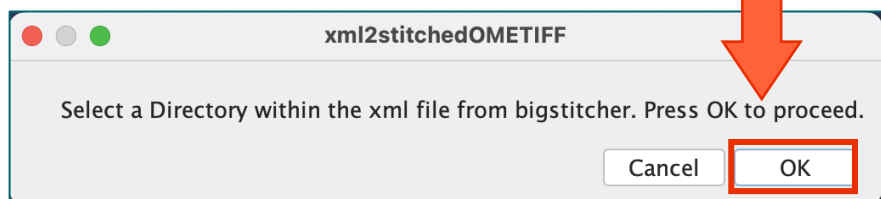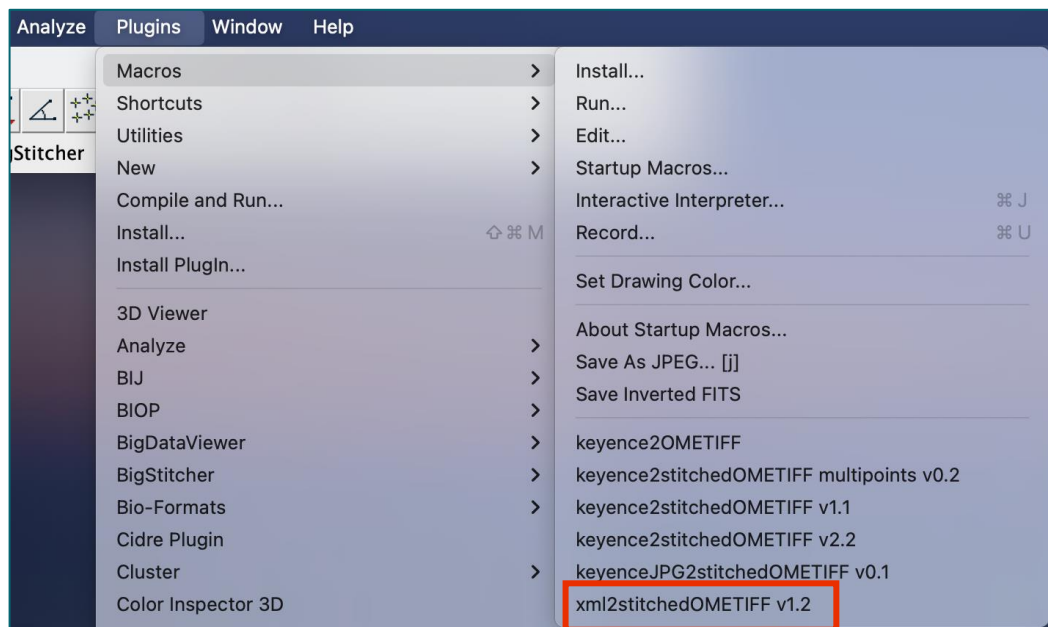

keyence2stitchedOMETIFFで作成した連結画像がちょっとずれているので修正したい。。。

⑥ プラグインを使用する (Plugins > Macros > xml2stitchedOMETIFF_v1.2) の続き

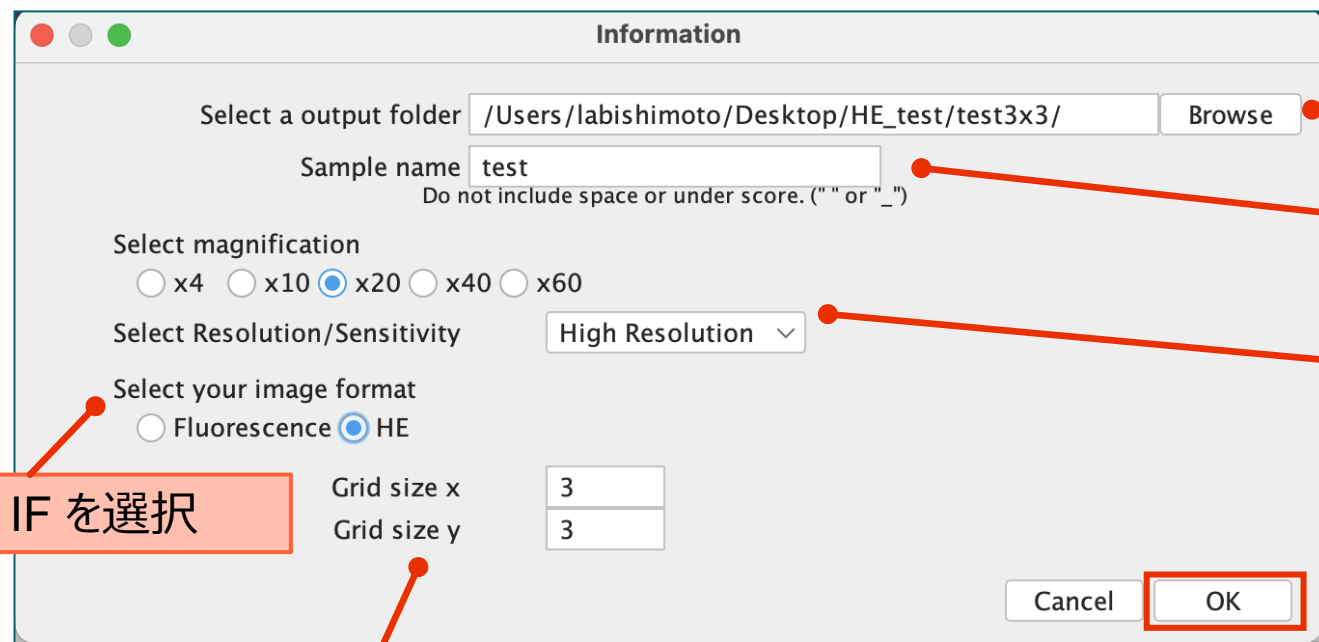

1. OME-TIFFを保存したいフォルダを選択

2. Sample名を入力

3. 撮影レンズと解像度を選択

4. HE or IF を選択

5. 連結画像を撮影した時の枚数を入力 (横 x 縦)



Command finished が出たら完了
※保存されたOME-TIFF画像を確認してダメそう
だったらもう一度①からやってさらに再計算させる